

NURSE CALL RAULAND



36V POWER SUPPLY

1. Menyediakan daya 36V DC untuk main system controller, VoIP nurse console, 8-port ethernet switch dan opsi responder network concentrator.
2. Output terukur pada 2.4 A.
3. Memiliki backup battery yang tertanam di dalam perangkat dengan tombol on/off.
4. Auto-sensing input voltage range.
5. LED menunjukkan status.
6. Terpasang pada kabinet perangkat NC2828 dan 351102.
7. Tombol on/off untuk kemudahan instalasi dan service.



15V POWER SUPPLY

1. Menyediakan energi 15V DC untuk stasiun pasien, lampu koridor, domeless controllers dan perangkat K-Bus lainnya.
2. Nilai output 4.65 A.
3. Memiliki battery backup yang tertanam di dalam perangkat dengan tombol on/off.
4. Auto-sensing input voltage range.
5. LED yang bisa mengindikasikan status perangkat.
6. Terpasang pada kabinet perangkat NC2828 atau 351102.
7. Tombol on/off untuk daya yang mempermudah pemasangan dan service.



VoIP CONSOLE

1. VoIP audio nurse console.
2. Layar berwarna.
3. Dapat menampilkan hingga tiga panggilan aktif dengan kemampuan untuk melihat panggilan tambahan lainnya.
4. Dapat diprogram dengan 32 fungsi.
5. Mempunyai 12 jenis nada dering unik yang dapat di-mute ketika dibutuhkan.
6. Dilengkapi dengan fitur hands-free speaker.
7. Volume audio dapat diatur.
8. Supervisi yang berlangsung terus-menerus dengan fitur self-diagnostics dan distinctive console failure audio alert.
9. Memiliki mounting stand yang universal sehingga perangkat bisa dipasang di meja maupun di dinding.



MAIN SYSTEM CONTROLLER

1. Mengontrol sistem stasiun kamar dan lampu koridor / domeless controllers.
2. Mendukung hingga 92 lampu koridor dan domeless controllers.
3. Empat slot koneksi power over ethernet (PoE) untuk kemudahan komunikasi dengan VoIP console atau MSC lainnya.
4. Empat port yang bisa dihubungkan dengan empat K-Bus independen.
5. Menyimpan konfigurasi konsol, lampu koridor, domeless controllers dan stasiun.
6. Menyediakan data feed untuk laporan dan activity board.
7. Connector RJ45 untuk kemudahan service.



L2K ADAPTER

1. Menyediakan konversi data bi-directional ke atau dari perangkat K-Bus dan sistem kontrol utama.
2. Mendukung hingga 46 perangkat K-Bus dan stasiun lain yang terhubung dengannya.
3. Mengizinkan koneksi untuk audio paths ke atau dari sistem eksternal ancillary devices (SIP Phones, SIP PBX, dsb.)
4. Koneksi mendukung dynamic hot plug.
5. Satu konektor K-Bus in-line.
6. Satu konektor L-Net RJ45.
7. Indikator visual menampilkan data, power dan status perangkat.




RESPONDER FEATURE SERVER

1. Activity board memberi akses kepada staff tertentu untuk membaca aktivitas nurse call yang sedang berlangsung.
2. Menyediakan lima laporan berbeda mengenai detail riwayat respon staff dan aktivitas nurse call.
3. Mekanisme pelaporan berulang yang memperbolehkan hingga lima laporan untuk dikonfigurasi dan dikirim otomatis melalui e-mail.
4. Perawat dapat menghubungi staff lain ketika pasien membutuhkan bantuan.
5. Modul manajemen pasien.
6. Modul administrasi untuk pengaturan user, activity board dan sistem.

RAULAND RESPONDER 5000

Rauland Responder 5000 adalah perangkat nurse call seri terbaru dari Rauland yang berfokus pada peningkatan komunikasi dan waktu merespon pada workflow yang semakin efisien, kepuasan pasien dan staff rumah sakit, serta menciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman.

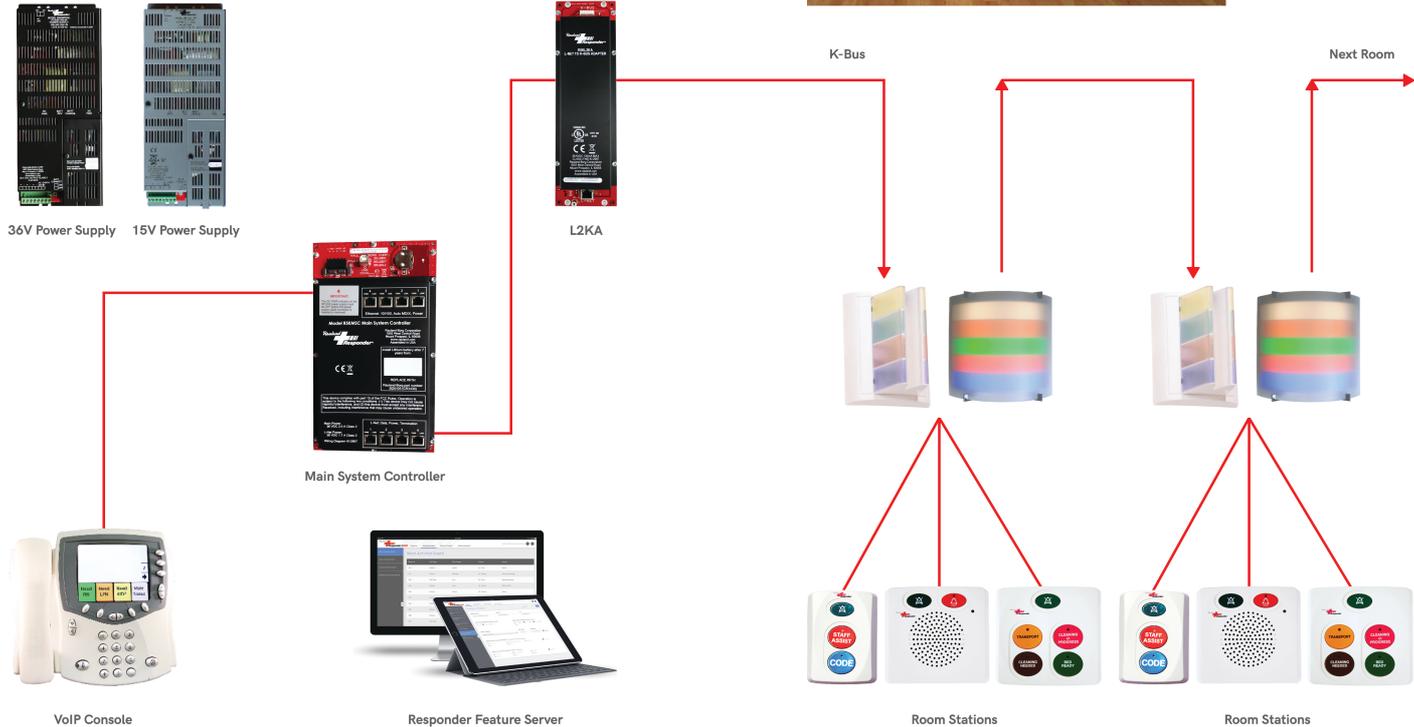



CORRIDOR LIGHT 1 AUDIO 6 PT

1. Empat warna LED dengan flash rates yang bisa di-program untuk mengindikasikan panggilan tertunda, kebutuhan service dan kehadiran staff.
2. Mendukung hingga enam stasiun panggilan masuk, di mana salah satunya dilengkapi dengan fitur audio.
3. Dengan tambahan CLAR46, lampu koridor dapat mendukung enam stasiun panggilan masuk, di mana empat di antaranya dapat dilengkapi dengan fitur audio.
4. Status modul LED akan menyala ketika unit tidak berfungsi dengan benar.
5. Berfungsi sebagai pusat untuk semua kabel yang terpasang di kamar pasien.
6. Surface mount untuk kemudahan instalasi.



CORRIDOR LIGHT 4 AUDIO 6 PT

1. Dapat mengakomodasi enam stasiun connection points, empat di antaranya dilengkapi dengan fitur audio.
2. Sconce design yang cantik dan tidak kaku.
3. Warna LED dapat mengindikasikan panggilan aktif, pengingat service dan kehadiran staff.
4. Lima warna LED dapat diprogram dengan flash rates.
5. Lensa lengkung memberikan sudut pandang yang luas.
6. Bekerja juga sebagai modul kontrol untuk stasiun kamar.
7. Status LED mengindikasikan status operasional lampu koridor.
8. Operasi yang fail-safe ketika terjadi kehilangan komunikasi data.
9. Surface mount untuk kemudahan instalasi.



STAFF STATION

1. Tombol khusus untuk berkomunikasi dengan staff.
2. (1) Call assurance LED dan (1) Monitor LED.
3. Tombol batal untuk stasiun ataupun untuk seluruh ruangan.
4. Opsi antimicrobial bio-seal yang melindungi tombol-tombol.
5. Supervisi terus-menerus untuk kehadiran di stasiun.
6. Surface mount untuk kemudahan instalasi.
7. Mounting design mengakomodasi berbagai variasi single dan dual gang backboxes.



4-BUTTON WORKFLOW STATION

1. Empat tombol independen untuk menginisiasikan workflow, place calls dan menandakan kehadiran staff.
2. Tombol dilengkapi dengan backlit.
3. Teks dan warna tombol dapat dimodifikasi.
4. Terdapat tombol batal untuk stasiun ataupun untuk seluruh ruangan.
5. Fitur call assurance LED untuk setiap tombol.
6. Opsi antimicrobial bio-seal untuk melindungi tombol-tombol.
7. Supervisi terus-menerus untuk kehadiran di stasiun.
8. Surface mount untuk kemudahan instalasi.
9. Mounting design mengakomodasi berbagai variasi single dan dual gang backboxes.



STAFF ASSIST CODE STATION

1. Dua call points dengan call-assurance LED dan monitor LED.
2. Tombol dilengkapi dengan backlit.
3. Dilengkapi dengan tombol batal.
4. Supervisi stasiun yang dilakukan terus-menerus.
5. Konektor plug-in untuk kemudahan service.
6. Output untuk elapsed timer.
7. Opsi antimicrobial bio-seal untuk melindungi melindungi tombol-tombol dan mempermudah pembersihan.